



MMC INTERNATIONAL

Votre partenaire dans la lutte contre les drogues...

2013-2014

Dans ce numéro

INTRODUCTION

MMC International BV est le fabricant des kits de tests présomptifs de narcotique sur le terrain MMC et le fournisseur de plusieurs produits dérivés.

Nous avons un laboratoire où nous effectuons des analyses (GC/MS, etc.) et nous mettons au point de nouveaux kits de tests MMC.

Les clients principaux sont : La police, les douanes et les accises, les prisons et d'autres autorités d'application de la loi.

Nous avons un réseau mondial de distribution constitué d'environ...50 distributeurs.

Dans ce bulletin, nous voulons vous informer sur les caractéristiques de nos produits.

LE PÈSE-DROGUE MOBILE GRATUIT !

Si vous commandez de **50 packs** ou plus des tests MMC narcotiques (mélange autorisé), un **pèse-drogue mobile gratuit** vous sera offert. (Max. 1 par nouveau client)



PROFIL DE L'ENTREPRISE

M.M.C. International. B.V. créée en 1992, est établie à Breda aux Pays-Bas.

M.M.C. est spécialisée dans la production de tests de détection de narcotiques et de précurseurs. Les tests narcotiques et précurseurs, sont mis au point avec la collaboration étroite de la police, des autorités douanières et d'accises. La société est certifiée par VERITAS et a reçu le certificat EN ISO 9001-2000.

La société est référencée en qualité de fournisseur depuis 1994 par toutes les organisations des Nations Unies sous N°.100346 / Net 0309 et la place du marché mondial des Nations Unies # 149548.

Le laboratoire international de M.M.C est spécialisé dans la production et la mise au point de produits de détection de narcotiques. Les tests sont produits en conformité avec les exigences établies par les forces de police, les douanes & l'accise et des laboratoires médico-légaux.

Les ampoules sont remplies de matériaux solides traités, qui sont imprégnés de réactifs de très haute qualité et d'une couverture d'azote très pure et hermétiquement scellée. Chaque lot est continuellement testé et enregistré.


Tous les produits sont tamponnés d'un numéro de lot, d'une date de production et d'expiration.

MMC fournit également d'autres produits dérivés tels que la mallette de formation sur les narcotiques, les tests d'adipate de dioctyle, le trolley mobile de laboratoire de narcotiques, la caméra d'inspection pour les douanes, etc...

Introduction



Kits de test de narcotiques sur le terrain MMC et mode d'utilisation.

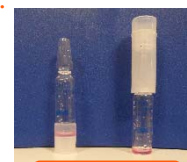

Test synthétique
cannabinoïde MMC

ANCIEN NOUVEAU



Tests spécialisés MMC



Zoom sur les tests médico-légaux MMC



D'autres produits et programmes de formations





Tests sur le terrain MMC

Au fil des années, MMC International a mis au point plusieurs tests présomptifs sur le terrain. Ces tests sont surtout utilisés par les organes **d'application de la loi, les organes du gouvernement et les laboratoires médico-légaux.**

Contrairement à d'autres kits de tests de présomption de drogues, les Kits MMC International contiennent très peu de réactifs et le neutralisant d'acide n'est pas exigé. Cette nouvelle formule révolutionnaire élimine tout danger potentiel sur les agents pendant son utilisation sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans risque, facile à employer et économique
- Aucun risque/danger pour l'environnement
- Tests à étape unique (une ampoule seulement)
- Résultats en quelques secondes
- Haute fiabilité et uniformité
- Précis et sensibles
- Examen facile des narcotiques en liquides tels que GHB, GBL, et le XTC liquide, etc.



*Pas pour des tests de boissons

Aussi disponible en : Bandes d'essai 1,4BD/GHB/GBL



Nous avons également des malles de tests narcotiques disponibles avec et ou sans outils. Nous pouvons aussi fournir des malles de transport vides de différentes tailles...

Tests narcotiques sur le terrain MMC

- Test de barbituriques
- Test de buprénorphine
- Test de cannabis / marijuana
- Test de cocaïne / crack
- Test de méthamphétamine/ XTC
- Test d'éphédrine (chlorhydrate)
- Test de fentanyl/ oxycodone/héroïne-morphine et codéine
- Test de qat (khât) séché
- Test de qat (khât) frais
- Test de dépistage général
- Test de GHB (AGH)
- Test d'héroïne
- Test de kétamine
- Test de LSD (LAD)
- Test de M & H
- Test de MCPP
- Test de méthadone
- Test de méthaqualone
- Test de opiacés/ amphetamines
- Test de PCP (phencyclidine)
- Test de pentazocine
- Test de phénéthylamines (de 2C-Smiles)
- Test de methamphetamine

- Test préliminaire
- Test de propoxyphène (PPX)
- Test de cannabinoides synthétiques (K2, Spice)
- Test de cathinones synthétique (sels de bain)
- Test de V&R (Valium/ Rohypnol)
- Kit de test d'odeur de cocaïne
- Tests divers

Plusieurs tests ont été évalués/approuvés par le NFSTC et le Virginia Science Lab (Laboratoire scientifique de Virginie).

Tests précurseurs sur le terrain MMC

- Test d'hydroxyde de calcium
- Test d'acétone
- Test d'anhydride acétique
- Test d'acide anthracéique
- Test de chlorure d'ammonium
- Test d'ergotamine
- Test d'ergométrine / oxycotin
- Test (Iso)-safrole
- Test de 1-phényl-2 propanone
- Test d'acide phényl acétique
- Test de pipéronal
- Test de permanganate de Potassium
- Test de propoxyphène HCL
- Test du carbonate de sodium
- Test de toluène
- Test GBL (Gamma-Butyrolactone)
- Test d'éphédrine
- Test PMK/BMK
- Test d'alpha phénylacétonitrile (Apaan)

Test spécialisés MMC

- Test de pureté de la cocaïne
- Test de pureté de l'héroïne
- Test de pureté de la MDMA
- Kit d'analyse de la cocaïne
- Test de produits de mélange de la cocaïne



Nouvelle ampoule de test avec briseur d'ampoule sur chaque test pour une utilisation facile et sans risque.

Comment l'utiliser

1



Tapez l'ampoule fermée plusieurs fois sur une surface dure afin que les granulés qui pourraient coller sur la partie intérieure de la paroi de l'ampoule retombent vers le bas.

2



Tenez la tête de l'ampoule entre le pouce et l'index et brisez la tête (soudure) avec le briseur d'ampoule.

3



Utilisez la spatule pour introduire la substance suspecte dans l'ampoule.

4



Pour les échantillons suspects en liquide tels que le GHB, nous conseillons d'utiliser le bout rond de la spatule fournie ou autrement, d'utiliser une pipette pour introduire une (1) goutte dans l'ampoule.

5



Avec certains tests MMC, les couvercles en plastique contiennent une perle catalyseur qui, une fois la substance à tester introduite dans l'ampoule, doit être mélangée à l'aide du bout rond de la spatule.

6



Attention ! Si la bille dans le couvercle cale sur le côté, veuillez utiliser la spatule pour l'enlever et, mettez-la dans l'ampoule puis mélanger. Placez le couvercle en plastique sur la tête de l'ampoule.

7




Comparez la couleur des réactifs granuleux avec la ligne de couleur imprimée sur l'ampoule ou sur la pochette.

8



Étant donné que les tests MMC ne nécessitent pas de neutralisants d'acide (comme ceci se fait automatiquement à l'intérieur des ampoules) vous pouvez mettre au rebut les ampoules utilisées dans une poubelle ou un bac poubelle verre.

NOUVELLE FORMULE POUR VOTRE SÉCURITÉ !

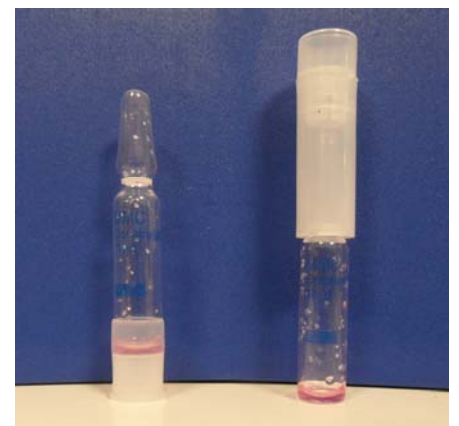

ANCIENNE NOUVELLE